


Wiba Sport AG
Spahau 1 • 6014 Luzern
Telefon 041 250 80 80
info@wiba-sport.ch
www.wiba-sport.ch







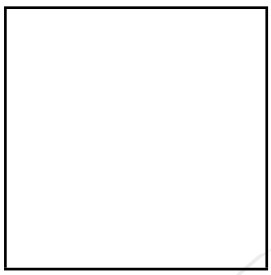

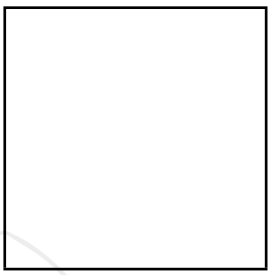

Produktinformationsblatt

Mehrfach-Kalt/Warmkompresse

Kalt Anwendung: Die Kompresse wird für 2 Stunden in das Gefrierfach oder die Tiefkühltruhe gelegt. Vor dem Auflegen auf die Haut, sollte die Kompresse in ein Tuch eingewickelt werden. Warm Anwendung: Die Kompresse wird für ca. 5 Minuten in max. 80° Grad heissem Wasser erwärmt. Alternativ kann die Kompresse auch in der Mikrowelle bei 500 Watt erhitzt werden. Hierbei sollte die Kompresse nicht länger als 2 Minuten in der Mikrowelle erhitzt werden. Vor dem Auflegen auf die Haut, sollte die Kompresse in ein Tuch eingewickelt werden.

Artikelnummer: D6117

Zubehör zum Artikel

D6115 - Mehrfach-Kalt/Warmkompresse - 16 x 26 cm
D6118 - Mehrfach-Kalt/Warmkompresse - 8 x 13 cm
D6119 - Mehrfach-Kalt/Warmkompresse - alle Grössen
D6124 - Mehrfach-Kalt/Warmkompresse - 13 x 14 cm
D6125 - Mehrfach-Kalt/Warmkompresse - 12 x 29 cm


D6115


D6118


D6119


D6124


D6125